

enovis™

DONJOY®

OA GO®

**PIJNVERLICHTING VOLGENS
DE REGELS VAN DE KUNST.**



DONJOY®

OA GO®

PIJNVERLICHTING VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST.

We weten allemaal hoe belangrijk het is om actief te blijven, vooral als we ouder worden. Maar als pijn in de weg staat, is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan.

OA GO® van DonJoy® helpt verlichting te bieden bij pijn en mobiliteitsproblemen veroorzaakt door milde tot matige knieartrose. Met een simpele draai aan de knop, ontlast het driepuntsontlastingssysteem van deze innovatieve zachte kniebrace snel het aangetaste compartiment om de pijn te verlichten en de beweging te vergemakkelijken.^{1,2}

OA GO® is een lichtgewicht combinatie van een sleeve en een wrap die over het been kan worden aangetrokken. De flexibele balleinen zijn verbonden met een systeem van kabels die bediend worden door dubbele BOA® draaiknoppen - U hoeft alleen maar te draaien om het benodigde niveau van ontlasting te bereiken en klaar bent u.

Daarom, of activiteit nu wandelen in de natuur betekent, de trappen van een galerie beklimmen of spelen met de kleinkinderen, deze brace is een uitnodiging om er helemaal voor te gaan.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES

- Milde tot matige unicompartimentele artrose (mediaal of lateraal).
- Varus- of valgusknieaandoeningen die baat kunnen hebben bij unicompartimentele ontlasting.

1. Ramsey DK, Russell ME. Unloader Braces for Medial Compartment Knee Osteoarthritis: Implications on Mediating Progression. *Sports Health - A Multidisciplinary Approach*. 2009;1(5): 416-426.

2. Mistry DA, Chandratreya A, Lee PYF. An Update on Unloading Knee Braces in the Treatment of Unicompartimental Knee Osteoarthritis from the Last 10 Years: A Literature Review. *Surg J (N Y)*. 2018 Jul 2;4(3): e110-e118



A detailed view of a black knee brace worn on a person's knee. The brace features a mesh fabric with several BOA dials for adjustable tension. There are also condyle pads and flexible hinges. Labels with leader lines point to various components.

HALFHARDE ROMPEN

BOA® KNOP

CONDYLE PADS

FLEXIBELE BALEINEN

BOA® KNOP

HALFHARDE ROMPEN

FUNCTIES EN VOORDELEN

COMFORT



ANATOMISCH GEVORMDE CONDYLE PADS: Passen zich aan de anatomie van de knie aan voor een betere drukverdeling. Twee verschillende diktes (10 mm en 13 mm) van condyle pads voor een individuele pasvorm en comfort voor verschillende anatomieën.



ANTI-SLIP BANDEN: Gepositioneerd aan de bovenkant van de dij om migratie van de brace te voorkomen en een comfortabele pasvorm te behouden.



ADEMEND, REKBAAR, ANTIBACTERIEEL MATERIAAL: Bevorderen comfort, compliance en hygiëne, waardoor langdurig gebruik mogelijk is. Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex. Lycra® aan de achterkant biedt extra comfort en vrijheid ter hoogte van de knieholte.

HET GEBRUIK




HYBRIDE SLEEVE/WRAP DESIGN: Half wrap, half sleeve, OA GO® combineert de voordelen van beiden voor een snelle en eenvoudige fitting. Open gewoon het dijbeengedeelte, trek dan het onderste over de kuit en sluit vervolgens het hook-and-loop bevestigingssysteem.



NAUWKEURIGE PASVORM EN SNEL AFNEEMBAAR: Twin multidirectionele BOA® Li2 draaiknoppen leveren een nauwkeurige pasvorm die is ontworpen voor prestaties in de zwaarste omstandigheden. Draai met de klok mee en linksom voor het onafhankelijk en losmaken van de dij- en kuitzones, of trek omhoog voor snel losmaken.



GEMAKKELIJK VAST TE PAKKEN TREKLIPJE: Voor snel en eenvoudige bevestiging en ontgrendeling en kan plat worden ingeklapt om te voorkomen dat we blijven vasthaken.

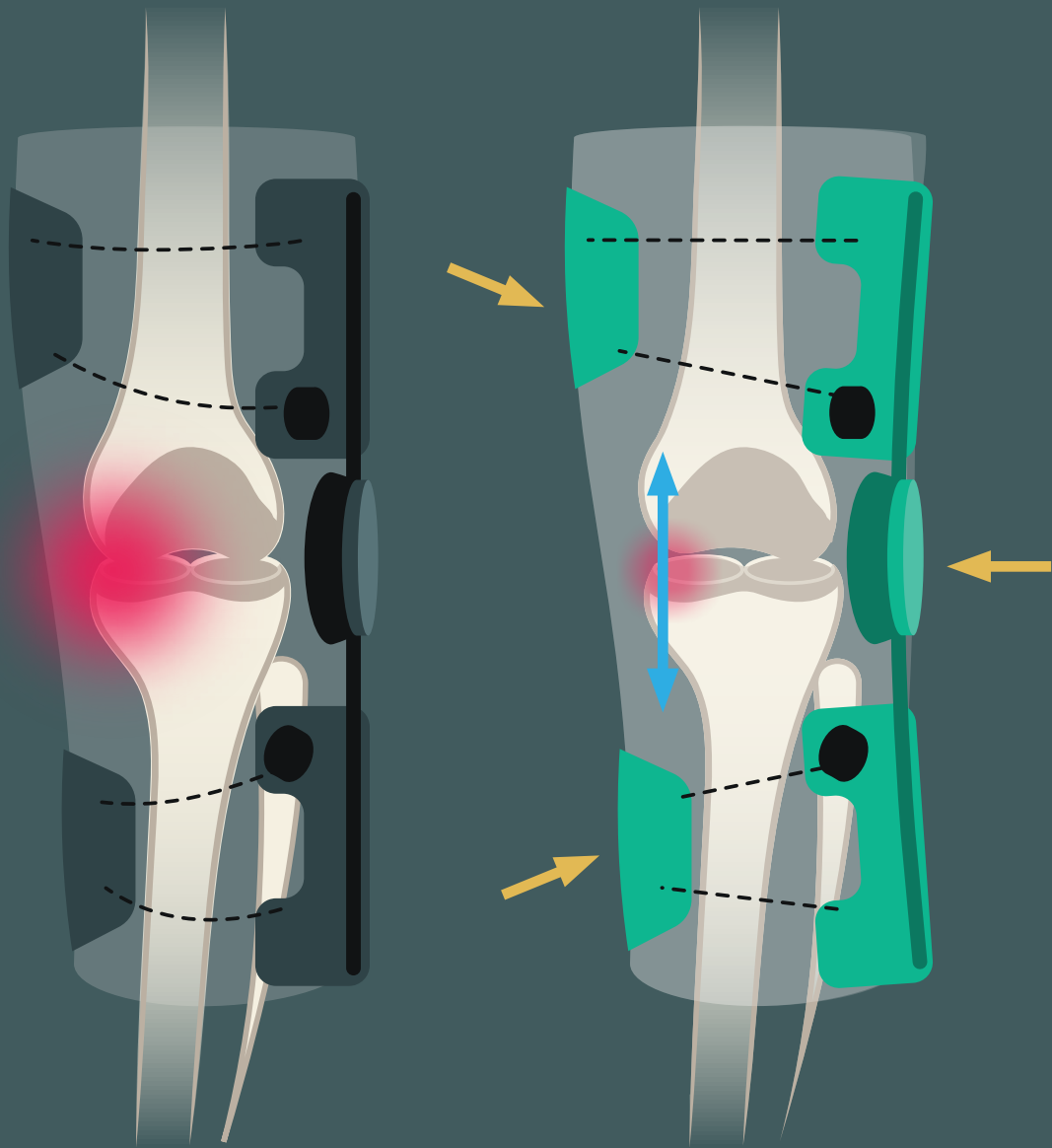


UNIEK 3-PUNTS SYSTEEM

Het gepatenteerde systeem van OA GO® maakt gebruik van instelbare BOA® draaiknoppen om het spanningsniveau in de twee kabelsussen te regelen.

Deze spanning heroriënteert de flexibele elementen van de brace om een 3-punts systeem te creëren dat het getroffen compartiment ontlast en verlichting helpt bieden

BESTELINFORMATIE

RECHTERBEEN MEDIAAL / LINKERBEEN LATERAAL		LINKERBEEN MEDIAAL / RECHTERBEEN LATERAAL		DIJ OMTREK	MAAT
ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	ARTIKELNUMMER	GTIN CODE		
82-7428-1	0190446820376	82-7429-1	0190446820437	33 – 39 cm	XS
82-7428-2	0190446820383	82-7429-2	0190446820444	39 – 47 cm	S
82-7428-3	0190446820390	82-7429-3	0190446820451	47 – 53 cm	M
82-7428-4	0190446820406	82-7429-4	0190446820468	53 – 60 cm	L
82-7428-5	0190446820413	82-7429-5	0190446820475	60 – 67 cm	XL
82-7428-6	0190446820420	82-7429-6	0190446820482	67 – 75 cm	XXL

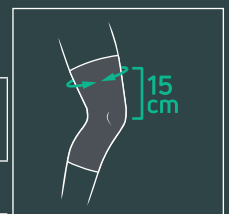



DONJOY®

enovis™

Creating Better Together™

Enovis™ - DJO Benelux BVBA
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | België
www.enovis.be

Medische hulpmiddelen van Klasse I met CE-markering.
Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik. Vraag advies aan een arts. Fabrikant: DJO LLC - USA.

MKGBNLBV104 - Rev A - 06/2024

Copyright © 024 DJO LLC, een dochtermaatschappij van Enovis

